



Sterilné lancy / Sterilni lancy

☐ Jednoduchý sterilní bariérový systém/
Jednoduchý sterilní bariérový systém

1. Před použitím produktu si pozorně přečtěte návod k použití.
2. Poradte se se zdravotnickým personálem o vhodné specifikaci lancety (hloubka průniku a průměr jehly/ šifka čepele), pokud ještě nejsou známy.
3. Výrobek je pouze pro jednorázové použití. Nepoužívejte opakovaně. Nesterilizujte.
4. Výrobek nepoužívejte, pokud je ochranný kryt poškozen nebo nejméně oteplen před použitím.
5. Pokud je výrobek poškozen nebo kontaminován, nepoužívejte jej.
6. Výrobek nepoužívejte, pokud uplynula doba použitelnosti.
7. Vyberte si místa vpichu, které je teplé, růžové a bez jakýchkoli mohlů, popálenin, řezných ran, jizev, modřin nebo výrážek. Místo by nemělo být cyanotické (modré z nedostatku kyslíku), edematózní (oteklé) nebo infikované. Vyhněte se oblastem suché, které mají známky předchozího vpichu nebo jsou jinak narušeny.
8. Při pichnutí do prstu se vyhnětete palcům a ukazáčkům vlní mazole a malíčku, protože tkáň je tenká.
9. Pokud je dítě starší než 1 rok, můžete také použít místo u zápěstí, pokud je dostupné a není poškozené nebo zdravotnický personál.
10. Pro děti starší 1 roku a mladší 8 let není hloubka průniku přesáhnutí 1,5 mm v případě přímého do prstu.
11. Při odběru vzorku kapilární krve na screening novorozenci by měl výrobek obsluhovat zdravotničtí pracovníci.
12. U kojenců mladších jednoho roku se kapilární krev musí získat z paty. Získání krve se musí vyskytnout na středním nebo bočním plantárním povrchu paty.
13. Při odběru kapilární krve z prstů kočky: mladšího jednoho roku nesmí hloubka průniku přesáhnutí 2,0 mm, jinak hrozí poranění prstu (celulitida).
14. U kojenců se punkce nesmí provádět na: (1) Zadní zakřivení paty. (2) Centrální oblast chodidla dítěte (oblast klenby).
15. (3) Prsty novorozence nebo dítěte mladšího jednoho roku, aby se předešlo poranění kosti. (4) Oteklé místo. (5) Předchozí místa vpichu. (6) Úsní lalůčky.
16. Abyste získali požadovaný objem krve, vyhněte se silnému opakování tlaku (dojení); může způsobit hemolýzu nebo kontaminaci vzorku krev křákovou tekutinou.
17. Tento výrobek obsahuje malé částí. Uchovejte mimo dosah dětí. Produkt ihned po použití zlikvidujte.
18. S výrobkem manipulujte opatrně, abyse předešlo poranění injekční jehlou.
19. Zlikvidujte použitou lancetu do schválené nádoby na likvidaci ostrých předmětů v souladu s pokyny zařízení a místními předpisy.

1. Vyberte místo vpichu:
Pro pichnutí do prstu (dospělí a děti starší jednoho roku): upřednostňuje se prsténček.
Výhrněle se mohou použít i ukazováček a výhrněle se malíček, protože ten je tenká.
U dětí se povízkou mohou vyvolat krvácaní. Vyberte místo, které vydrží bez otřesů prstí.
2. Při pichnutí do prstu (koence malíku jednoho roku): krvavý výtok se vyskytuje na mediálním nebo laterálním plantárním povrchu paty.
3. Místo vpichu vydezinfikujte alkoholem. Nechte stranou vytvářet
3. Stálé ochranné krycí
4. Umístěte lancetu s ošpičkami pevně na bod vpichu. lancetu pevně na místo vpichu, aby se aktivovala aktivace. Systém kličky signalizuje aktivaci.
5. Zkontrolujte použitou lancetu. Pokud se vyhodí, vyberte novou lancetu. Při pichnutí do prstu v souladu s pokyny pro zařízení a místními předpisy.
6. Očete prsty papíru krev sterilním gázerou tamponem, několik sekund, aby se vyvolala kapka krve. Pokud krev klesne, jemně aplikujte přerušovaný tlak na místo kapání prstu a na místo kapání prstu a na místo kapání prstu.
7. Pokračujte v testování hadičky kapky v kvi nebo v jiných testech.
8. Někdy se objeví kapání krev podle este postupů vašeho zařízení.
Po dokončení postupu vyjměte lancetu a aplikujte tlak na místo, aby zastavil krvácaní.



C



Sterilné lancety / Sterilní lancety

na jednorázové použitie / pro jednorázové použití



CE 0123

100 ks


PLATE 4

 Dátum spotreby /
Datum spotřeby

Název a adresa výrobce/
Jméno a adresa výrobce

 Ningbo Medsun Medical Co., Ltd.
No.55 Jinxi Road, Zhenhai 315221 Ningbo
People's Republic of China

EC	REP	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
----	-----	---

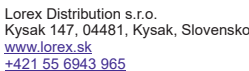

Farba/Barva	Model	Farba/Barva	Model
	30G		23G
	28G		21G
	26G		0.8mm
	25G		1.2mm

Dátum revízie textu 21.2.2024 Verzia 01