

325.0 mm
12.8 in

2.56"

GLUE PANEL

final facing panels when folded

1.97"

1.97"

Edge Bar(s) for Vendor verification:
Bar(s) may be located anywhere along the length of the Spine in this panel.
Black Edge Bar should be on print layer.

GLUE PANEL

Senzor FreeStyle Libre 3 Plus
Přibalová informace

PŘED MANIPULACÍ SE SOUPRAVOU SENZORŮ SI PŘEČTĚTE TUTO PŘIBALOVOU INFORMACI A VEŠKERÉ OZNAČENÍ DODANÉ S APLIKÁCIÍ FREESTYLE LIBRE 3. POKUD POUŽÍVÁTE ČTEČKU, ŘÍDTE SE OZNAČENÍM PŘILOŽENÝM K SOUPRAVĚ ČTEČKY FREESTYLE LIBRE 3.

Pro použití s přístroji: Aplikaci FreeStyle Libre 3 a čtečkou FreeStyle Libre 3. (Všechny výrobky nemusi být dostupné ve všech zemích.)

Indikace pro použití
Senzor systému pro okamžité monitorování glukózy FreeStyle Libre 3 Plus („senzor“) je při použití s kompatibilním zařízením indikován pro měření hladin glukózy v intersticiální tekutině u osob (od 4 let věku) s diabetem, včetně těžších žien. Senzor a kompatibilní zařízení („systém“) jsou navrženy tak, aby nahradily měření glykémie při léčbě diabetu, včetně dávkování inzulínu.

Systém je určen pro použití pacienty, jejich ošetřovateli a lékaři nebo zdravotními sestrami doma i ve zdravotnických zařízeních.

Indikace pro děti (věk 2–12) je omezena na děti pod dohledem pečovatele ve věku minimálně 18 let. Pečovatel je zodpovědný za správu senzoru a kompatibilního zařízení nebo za pomoc dítěti při práci se senzorem a také za interpretaci zjištěných hodnot koncentrace glukózy ze senzoru nebo za pomoc dítěti při jejich interpretaci.

UPOZORNĚNÍ:

- Senzor obsahuje malé části, které mohou být požití nebezpečné.
- Ve vzácných případech mohou být hodnoty koncentrace glukózy ze senzoru nepřesné. Pokud se domníváte, že zjištěné hodnoty nejsou správné nebo neodpovídají tomu, jak se cítíte, proveďte měření glykémie z prstu, abyste koncentraci glukózy potvrdili. Také se ujistěte, že se senzor neuvolnil. Pokud problém přetrvává nebo pokud se senzor uvolnil, sejměte stávající senzor a aplikujte nový.
- Intenzivní cvičení může způsobit uvolnění senzoru způsobené pocením nebo pohybem senzoru. Pokud se senzor uvolní, nemusíte získat žádné hodnoty nebo získané hodnoty mohou být nepřesné a nemusí to odpovídat tomu, jak se cítíte. Dodržujte pokyny pro výběr vhodného místa aplikace.
- Senzory nepoužívejte opakovaně. Senzor a aplikátor senzoru jsou navrženy pro jednorázové použití. Opakované používání může vést k absenci hodnot koncentrace glukózy a infekci. Není vhodný pro opětovnou sterilizaci. Další vystavení ozáření může způsobit nepřesné výsledky.
- Nepoužívejte, pokud je poškozený nebo pokud je na etiketě uvedeno, že aplikátor senzoru byl již otevřen.
- Některé osoby mohou být precitlivěle na lepidlo, které udržuje senzor na kůži. Pokud si povšimnete velkého podráždění kůže kolem senzoru nebo pod ním, sejměte senzor a přestaňte jej používat. Před dalším použitím senzoru se poraďte s lékařem nebo zdravotní sestrou.

Popis
Senzor je umístěn uvnitř aplikátoru senzoru. Podle pokynů připravte a aplikujte senzor na zadní stranu horní části paže. Senzor má malý ohebný hrot, který se zavede těsně pod kůži. Senzor můžete nosit až 15 dní.

Bezpečnost uživatele, skladování a manipulace

- Balení aplikátoru senzoru je sterilní, pokud není otevřeno nebo poškozeno.
- Soupravu senzoru uchovávejte při teplotách 2–28 °C. I když soupravu senzoru nemusíte uchovávat v chladničce, můžete ji v chladničce skladovat, pokud je teplota chladničky 2–28 °C.
- Vaš senzor byl testován tak, aby vydržel ponoření do jednoho metru (3 stopy) vody po dobu až 30 minut. Je také chráněn proti vkládání předmětů o průměru > 12 mm. (IP27)
- Nezmrazujte. Nepoužívejte po datu expirace.

Bezpečnostní informace o MRI:
Za podmínek uvedených v příručce uživatele můžete bezpečně podstoupit vyšetření MRI 1,5 T nebo 3 T, když máte na sobě senzor. Při nedodržení podmínek může dojít ke zranění. Telefon a čtečku nechte mimo vyšetřovnu. Během MRI mohou být hodnoty naměřené senzorem nepřesné, ale funkce systému se po 1 hodině vrátí zcela do normálu.

Likvidace
Pokyny k likvidaci naleznete v příručce uživatele.

Senzor FreeStyle Libre 3 Plus
Upute za proizvod

PRIJE RUKOVANJA KOMPLETOM SA SENZOROM PROČITAJTE OVE UPUTE I SVE OZNAKE ISPORUČENE S APLIKACIJOM FREESTYLE LIBRE 3. AKO UPOTRĚBLJAVATE ČITAČ, POGLEDAJTE OZNAKE ISPORUČENE U KOMPLETU S ČITAČEM FREESTYLE LIBRE 3.

Za uporabu uz: Aplikaciju FreeStyle Libre 3 i čitač FreeStyle Libre 3. (U nekim zemljama nisu dostupni svi proizvodi.)

Indikacije za uporabu
Kada se senzor FreeStyle Libre 3 Plus sustava za kontinuirano praćenje glukoze („senzor“) upotrebljava s kompatibilnim uređajem, indiciran je za mjerenje razine glukoze u međustaničnoj tekućini u osoba s dijabetesom (od 4. godine starosti), uključujući trudnice. Senzori i kompatibilni uređaji („sustav“) osmišljeni su kao zamjena za provjeru razine glukoze u krvi kod samokontrole dijabetesa, uključujući i doiranje inzulina.

Sustav je namijenjen pacijentima, njihovim njegovateljima i zdravstvenim djelatnicima kod kuće i u zdravstvenim ustanovama.

Indikacija za djecu (u dobi od 2. do 12. godine starosti) dopuštena je isključivo uz nadzor skrbnika starosti 18 godina i više. Skrbnik je odgovoran za upravljanje ili pomoć djetetu pri upravljanju senzorem i kompatibilnim uređajem te za tumačenje ili pomoć djetetu pri tumačenju očitavanja glukoze senzorum.

OPREZ:

- Senzor sadržava male dijelove koji mogu biti opasni ako ih se proguta.
- U rijetkim slučajevima može doći do neispravnih očitavanja glukoze senzorum. Ako smatrate da vaša očitavanja nisu ispravna ili da nisu u skladu s time kako se osjećate, provedite mjerenje glukoze u krvi iz jagodice prsta kako biste potvrdili razinu glukoze te provjerite je li vam senzor i dalje dobro pričvršćen. Ako je problem i dalje prisutan, ili ako se senzor olabavljuje, uklonite postojeći senzor i aplicirajte novi.
- Intenzivna tjelevoježba može olabaviti senzor uslijed znojenja ili pomicanja senzora. Ako se senzor odvoji od kože, postoji mogućnost da se očitavanja neće pojaviti ili da neće biti pouzdana te neće biti u skladu s time kako se osjećate. Slijedite upute za odabir prikladnog mjesta nanošenja.
- Senzore nemojte upotrebljavati više puta. Senzor i aplikator senzora osmišljeni su za jednokratnu uporabu. Ponovna uporaba može dovesti do neočitavanja glukoze ili infekcije. Nije prikladno za ponovnu sterilizaciju. Duga izloženost zračenju može dovesti do netočnih rezultata.
- Nemojte upotrebljavati ako je oštećen ili ako oznaka za neovaljšeno rukovanje ukazuje na to da je aplikator senzora već otvoren.
- Neki osobe mogu biti osjetljive na ljepilo pomoću kojeg se senzor pričvršćuje na kožu. Ako primijetite značajnu nadražnost kože oko ili ispod senzora, uklonite senzor i nemojte ga više upotrebljavati. Obratite se svojem zdravstvenom djelatniku prije nego što nastavite upotrebljavati senzor.

Opis
Senzor se nalazi unutar aplikatora senzora. Slijedite upute za pripremu i apliciranje senzora na stražnju stranu nadlaktice. Na senzoru se nalazi mali savitljivi vrh koji prodire u površinski sloj kože. Senzor se može nositi na tijelu do 15 dana.

Sigurnost korisnika, skladištenje i rukovanje

- Aplikator senzora sterilan je, osim ako nije otvoren ili oštećen.
- Uvajte komplet sa senzorum na temperaturi između 2 °C i 28 °C. Iako komplet sa senzorum ne morate držati u hladnjaku, možete ga držati u hladnjaku ako je temperatura između 2 °C i 28 °C.
- Senzor je ispitvan te je potvrđeno da može biti uronjen u vodu na dubini od 1 m do 30 minuta. Ima i zaštitu od umetanja predmeta koji imaju promjer veći od 12 mm. (IP27)
- Nemojte zamrzavati. Nemojte upotrebljavati ako je istekao rok valjanosti.

Sigurnosne informacije za snimanje MR-om:
Možete sigurno obaviti pregled MR-om od 1,5 T ili 3 T dok nosite senzor, pod uvjetima navedenim u korisničkom priručniku. Ako se uvjeti ne poštuju, može doći do ozljeđe. Ostavite telefon i čitač izvan ordinacije. Očitavanja senzora mogu biti netočna tijekom snimanja MR-om, ali funkcija sustava u potpunosti se vraća u normalno stanje nakon jednog sata.

Odlaganje u otpad
Za upute o odlaganju u otpad pogledajte korisnički priručnik.

Senzor FreeStyle Libre 3 Plus
Produktový leták

PRED MANIPULÁCIOU SO SOUAVOU SENZORA SI PREČÍTAJTE TENTO PŘIBALOVÝ LETÁK A VEŠKÝ STÝTKY DODANÉ S APLIKÁCIÍ FREESTYLE LIBRE 3. AK POUŽÍVATE ČÍTAČKU, POZRITE SI STÝTKY, KTORÉ SÚ SOUČASŤOU SÚPRAVY ČÍTAČKY FREESTYLE LIBRE 3.

Na použítie s nasledovnými: Aplikáciou FreeStyle Libre 3 a čítačkou FreeStyle Libre 3. (Nie všetky produkty sú dostupné vo všetkých krajinách.)

Indikácie pre použitie
Senzor systému okamžitého monitorovania glukózy FreeStyle Libre 3 Plus (ďalej len „senzor“) je indikovaný na meranie hladin glukózy v intersticiálnej tekutine u osôb (vo veku od 4 rokov) s ochorením diabetus mellitus, vrátane tehotných žien, ak sa používa s kompatibilným zariadením. Senzor a kompatibilné zariadenie („systém“) sú navrhnuté tak, aby nahradili meranie glykémie pri manažmente diabetu vrátane dávkovania inzulínu.

Systém je určený na použitie pacientmi, ich opatrovatelmi a zdravotníkmi doma a v zdravotníckych zariadeniach.

Indikácia pre deti (vo veku 2 – 12 rokov) je obmedzená na osoby, ktoré sú pod dohľadom opatrovateľa, ktorý má aspoň 18 rokov. Opatrovateľ je zodpovedný za správu senzora alebo pomoc dieťaťu pri správe senzora a kompatibilného zariadenia a tiež za interpretáciu alebo pomoc dieťaťu pri interpretácii hodnôt glukózy zo senzora.

UPOZORNENIE:

- Senzor obsahuje malé časti, ktoré môžu byť nebezpečné pri prehltnutí.
- V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť nepresné hodnoty glukózy zo senzora. Ak sa domnievate, že vaše hodnoty nie sú správne alebo nie sú v súlade s tým, ako sa cítite, vykonajte meranie glykémie z prsta, aby ste si potvrdili hladinu glukózy, a skontrolujte, či sa senzor neuvolnil. Ak problém pretrváva alebo ak váš senzor pevne nedrží, odstráňte aktuálny senzor a aplikujte nový.
- Intenzívne cvičenie môže spôsobiť uvoľnenie senzora v dôsledku potenia alebo pohybu senzora. Ak sa senzor uvoľní, je možné, že sa nezobrazia žiadne údaje alebo sa zobrazia nespoľahlivé údaje, ktoré sa nemusia zhodovať s vašími pocitmi. Pri výbere vhodného miesta aplikácie postupujte podľa pokynov.
- Senzory nepoužívejte opakovaně. Senzor a aplikátor senzora sú určené na jedno použitie. Opakované použitie môže mať za následok, že sa nebudete odčitávať glukózu, a môže dôjsť k infekcii. Nevhodné na opätovnú sterilizáciu. Ďalšie vystavenie ožarovaniu môže spôsobiť nepresné výsledky.
- Nepoužívejte, ak je aplikátor senzora poškodený alebo ak štítkoz označujúci manipuláciu naznačuje, že už bol otvorený.
- Některé osoby môžu být citlivé na lepidlo, které drží senzor připevněný na kůži. Ak spozoviete výrazné podráždenie kože okolo senzora alebo pod senzorum, odstráňte senzor a prestaňte senzor používať. Pred dalším použitím senzora sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka.

Opis
Senzor sa nachádza vo vnútri aplikátora senzora. Postupujte podľa pokynov a pripravte a aplikujte senzor na zadnú stranu ramena. Senzor má malý, ohybný hrot, ktorý vchádza tesne pod kožu. Senzor je možné nosiť maximálne 15 dní.

Bezpečnosť používateľa, uskladnenie a manipulácia

- Aplikátor senzora je sterilný, pokiaľ nebol otvorený alebo poškodený.
- Súpravu senzorum uchovávať pri teplote od 2 °C do 28 °C. Súpravu senzorum nemusíte uchovávať v chladničke, ale môžete, pokiaľ je teplota v chladničke v rozmedzí od 2 °C do 28 °C.
- Senzor bol odskúšaný a odoláva ponoreniu do hĺbky jedného metra (3 stopy) vody počas maximálne 30 minút. Je tiež chránený proti vstupu predmetov s priemerom > 12 mm. (IP27)
- Chráňte pred mrazom. Nepoužívejte po uplynutí dátumu expirácie.

Bezpečnostné informácie pre MRI:
Výšetrenie magnetickou rezonančiou (MRI) s výkonom 1,5 T alebo 3 T môžete bezpečne absolvovať aj s nasadeným senzorum za podmienok uvedených v návode na obsluhu. Pri nedodržaní podmienok môže dôjsť k zraneniu. Telefon a čítačku nechajte mimo vyšetřovne. Hodnoty namerané senzorum môžu byť počas MRI nepresné, ale funkcia systému sa po 1 hodine úplne vráti do normálu.

Likvidácia
Pokyny na likvidáciu nájdete v návode na obsluhu.

Symbole na označení | Símboly označavanja | Symbole označenja

STERILNÁ BARJIERNA Sterilní barjierna. V prípade otvorení alebo poškodení viz návod k použití. | Sterilina barjierna. U slučaju da je otvorena ili oštećena, pogledajte upute za uporabu. | Sterilna barjierna. Ak je otvorena alebo poškodena, prečítajte si návod na použitie.

Nepoužívať Nepoužívať, pokud je obal poškozen. | Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno. | Ak je balenie poškozené, pomôcku nepoužívejte a prečítajte si návod na použitie.

Pro sterilní barjiere: Nepoužívejte, pokud je poškozen systém sterilní barjiery výrobku nebo jeho obal. | **Za sterilnu barjiere:** Nemojte upotrebljavati ako su sustav sterilne barjere proizvoda ili njegovo pakiranje oštećeno. | **V prípade sterilnej barjiery:** Nepoužívejte, ak je poškodený systém sterilnej barjiery produktu alebo jeho balenie.

Nepoužívejte opakovaně | Nemojte upotrebljavati više puta doma a v zdravotníckych zariadeniach. | **Nepoužívejte opakovaně**

STERILIZOVANO Sterilizováno ozářením | Sterilizirano zračenjem | Sterilizované ožarováním

Datum konce použitelnosti | Datum isteka valjanosti | Datum použitelnosti

SN Sériové číslo | Serijski broj | Výrobné číslo

Teplotní omezení | Ograničenje temperature | Teplotny limit

Systém jednotné sterility | Systém jednotne sterilne barjere sa zaštitom ambalazom | Systém jednej sterilnej barjiery s vonkajším ochranným obalom

Aplikovaná část typu BF | Prilimjenjeni dio tipa BF | Aplikovana část typu BF

Výrobce | Proizvođač | Výrobca

Datum výroby | Datum proizvodnje | Dátum výroby

Přečte si návod k použití nebo si přečtěte elektronický návod k použití | Pročítajte upute za uporabu ili pogledajte upute za uporabu u elektroničkom obliku | Prečítajte si návod na použitie alebo si prečítajte elektronický návod na použitie

LOT Kód šarže | Šifra serije | Kód šarže

REF Katalogové číslo | Kataloški broj | Katalogové číslo

CE Značka CE | CE oznaka | Označenje CE

EC REP Autorizované zastoupení v Evropském společenství / Evropské unii | Ovlašteni predstavnik u Evropskoj zajednici / Evropskoj uniji | Spolnomocnený zástupca v Európskom spoločenstve / Európskej únii

Dovozce | Uvoznik | Dovoza

Distributor | Distributer | Distributor

Omezení vlhkosti | Ograničenje vlage | Limit vlhkosti

UDI Jedinečný identifikátor prostředku | Jedinostveni identifikator proizvoda | Jedinečný identifikátor pomôcky

MD Zdravotnický prostředek | Medicínski uređaj | Zdravotnícka pomôcka

Podmíněně bezpečné pro MR | Uvjetno sigurno za MR | Podmienečne bezpečne pre MR

Nepoužívat Tento výrobek se nesmí likvidovat v běžném odpadu. V Evropské unii je nutné likvidovat je odděleně jako odpad z elektrického a elektronického zařízení podle směrnice 2012/19/EU. Podrobnosti jsou k dispozici u výrobce. | Ovaj proizvod ne smije se odlagati u miješani otpad. U Evropskoj uniji zahtijeva se odvojeno prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme u skladu s Direktivom 2012/19/EU. Obratite se proizvođaču za pojedinosti. | Tento produkt sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. V Európskej únii sa vyžaduje triedený zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení podľa smernice 2012/19/EU. Podrobné informácie získate od výrobcu.

300.0
11.8 in

Abbott ADC Print Specifications			
Artwork Source File:	ART53933-004_rev-A.pdf (source/native file in zip)	Component Specification/MSA:	DOC49930
Total pages:	N/A	Barcode(s):	Code128: 53933004A
<small>NOTES: For the detailed information about the material, packaging and delivery, FAI and quality inspection requirements, refer to Component Specification or Material Specification Agreement (MSA).</small>			
		Ink(s): Black	

ART53933-004_rev-A.indd 1

7/21/25 10:05 AM

KROK 1: Vyberte místo.

KROK 2: Omyjte místo běžným mýdla, osušte jej a poté očistěte ubrouskem nasyceným alkoholem. Nechte místo vyschnout na vzduchu.

KROK 3: Odšroubujte uzávěr aplikátoru senzoru.

UPOZORNĚNÍ:

- NEPOUŽÍVEJTE, pokud je poškozený nebo pokud je na etiketě uvedeno, že aplikátor senzoru byl již otevřen.
- NENASAZUJTE zpět víčko, protože by mohlo dojít k poškození senzoru.
- NEDOTÝKEJTE se vnitřku aplikátoru senzoru, protože obsahuje jehlu.

KROK 4: Položte aplikátor senzoru na místo. Pevně zatlačte a aplikujte senzor.

UPOZORNĚNÍ: NETLAČTE na aplikátor senzoru, dokud nebude položený na připraveném místě, aby nedošlo k neočekávaným výsledkům nebo ke zranění.

KROK 5: Jemně odtáhněte aplikátor senzoru.

KROK 6: Zkontrolujte, že senzor je bezpečně připevněn. Použijte aplikátor senzoru zlikvidujte. Viz část *Likvidace* v příručce uživatele.

Informace o používání senzoru naleznete v příručce uživatele v aplikaci FreeStyle Libre 3. Stáhněte si aplikaci FreeStyle Libre 3 z App Store nebo Google Play Store a podle pokynů v aplikaci spusťte senzor. Pokud používáte čtečku, řiďte se příručkou uživatele přiloženou k soupravě čtečky FreeStyle Libre 3.

Nejnovější verze jednotlivých příruček uživatele je k dispozici na adrese www.FreeStyleLibre.com.

1. KORAK: Odaberite mjesto aplikacije senzora.

2. KORAK: Mjesto aplikacije operite običnim sapunom, osušite i zatim ga očistite s pomoću alkoholne maramice. Pričekajte da se mjesto aplikacije osuši na zraku.

3. KORAK: Odvrnite čep s aplikatora senzora.

OPREZ:

- NEMOJTE upotrebljavati ako je oštećen ili ako oznaka za neovlašteno rukovanje ukazuje na to da je aplikator senzora već otvoren.
- NEMOJTE vraćati čep jer može oštetiti senzor.
- NEMOJTE dirati unutar aplikatora senzora jer sadrži iglu.

4. KORAK: Aplikator senzora postavite iznad mjesta aplikacije senzora. Čvrsto pritisnite prema dolje kako biste aplicirali senzor.

OPREZ: NEMOJTE pritisnuti aplikator senzora dok ga ne postavite na pripremljeno mjesto kako biste spriječili neželjene rezultate ili ozljede.

5. KORAK: Pažljivo odmaknite aplikator senzora.

6. KORAK: Provjerite je li senzor dobro pričvršćen. Uputrijebljeni aplikator senzora odložite u otpad. Pogledajte odjeljak *Odlaganje u otpad* u korisničkom priručniku.

Upute za upotrebu senzora potražite u korisničkom priručniku u aplikaciji FreeStyle Libre 3. Preuzmite

aplikaciju FreeStyle Libre 3 iz trgovine App Store ili Google Play i slijedite korake u aplikaciji za pokretanje senzora. Ako upotrebljavate čitač, pogledajte korisnički priručnik u kompletu s čitačem FreeStyle Libre 3. Najnovija verzija svakog korisničkog priručnika dostupna je na www.FreeStyleLibre.com.

KROK 1: Vyberte miesto.

KROK 2: Miesto umyte obyčajným mydlom, osušte a potom očistite alkoholovým tampónom. Nechajte miesto vyschnúť.

KROK 3: Odškrtnújte vrchnák z aplikátora senzora.

UPOZORNENIE:

- NEPOUŽÍVAJTE, ak je poškodený alebo ak štítok s označením o neoprávnenej manipulácii naznačuje, že aplikátor senzora už bol otvorený.
- NENASADZUJTE späť kryt, pretože by ste mohli poškodiť senzor.
- NEDOTÝKAJTE sa vnútra aplikátora senzora, pretože obsahuje ihlu.

KROK 4: Umiestnite aplikátor senzora na miesto aplikácie. Pevne zatlačte, aby ste aplikovali senzor.

UPOZORNENIE: NEPRITLAČAJTE


aplikátor senzora, kým nebude umiestnený nad pripraveným miestom, aby ste predišli neželaným výsledkom alebo zraneniu.

KROK 5: Pomaly odtiahnite aplikátor senzora od tela.

KROK 6: Uistite sa, že senzor je upevnený. Použijte aplikátor senzora zlikvidujte. Pozri časť *Likvidácia* v návode na obsluhu.

Ak chcete používať senzor, pozrite si návod na obsluhu v aplikácii FreeStyle Libre 3. Stiahnite si aplikáciu FreeStyle Libre 3 z obchodu App Store alebo Google Play a postupujte podľa krokov v aplikácii, aby ste spustili senzor. Ak používate čítačku, pozrite si návod na obsluhu v súprave čítačky FreeStyle Libre 3. Najnovšia verzia každého návodu na obsluhu je k dispozícii na stránke www.FreeStyleLibre.com.


1

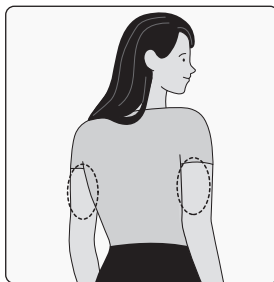


2




3

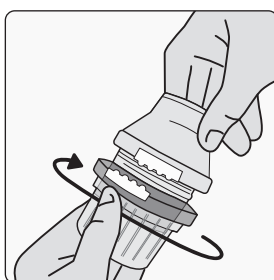

4

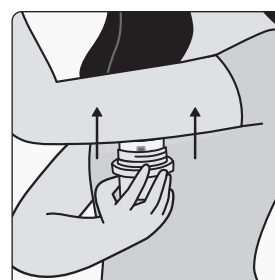

5

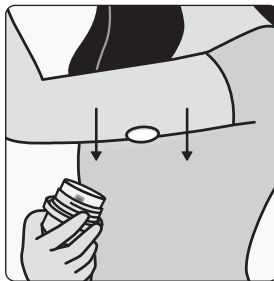

6



Společnost Abbott Diabetes Care Ltd. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu senzor FreeStyle Libre 3 Plus jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Celý text prohlášení o shodě s předpisy EU naleznete na internetové adrese: www.diabetescare.abbott/doc

Ovime društvo Abbott Diabetes Care Ltd. izjavljuje da je tip radijske opreme senzora FreeStyle Libre 3 Plus u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.diabetescare.abbott/doc

Spoločnosť Abbott Diabetes Care Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu senzora FreeStyle Libre 3 Plus je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.diabetescare.abbott/doc

Abbott Laboratories, s.r.o.
Abbott Diabetes Care
Evropská 2591/33d
160 00 Praha 6
Česká republika
Bezplatná infolinka: 800 189 564

Abbott Laboratories d.o.o.
Koranska 2
10000 Zagreb
Hrvatska
Besplatni info telefon: 0800 33 33 44
Slovensko
Bezplatná infolinka: 0800 189 564

Evropská unie | Evropska unija | Európska únia:
Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany

EC REP
Abbott B.V.
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp,
The Netherlands
CE
2797
Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon
OX29 0YL, UK

The sensor housing, FreeStyle, Libre, and related brand marks are marks of Abbott. Other trademarks are the property of their respective owners.

©2025 Abbott ARTS3933-004 Rev. A 07/25