



MOPEDIA®

CHODÍTKA

GAYA, OCEANO 2.0, SATURNO A URANO

návod k použití

OBSAH

1. KÓDY.....	STR. 3
2. ÚVOD.....	STR. 3
3. OBLAST POUŽITÍ.....	STR. 3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	STR. 3
5. VAROVÁNÍ.....	STR. 4
5.1 Všeobecná varování.....	str. 4
5.2 Varování.....	str. 4
5.3 Nosnost.....	str. 4
5.4 Rozložení a složení - varování.....	str. 4
6. SYMBOLY.....	STR. 5
7. PŘED POUŽITÍM.....	STR. 5
8. MONTÁŽ.....	STR. 5
8.1 Před montáží.....	str. 5
8.2 Montáž chodítka RP540.....	str. 5
8.2.1 Složení chodítka.....	str. 6
8.2.2 Montáž a nastavení rukojetí.....	str. 6
8.2.3 Taška.....	str. 6
8.2.4 Sedátko.....	str. 6
8.2.5 Opěrka noh.....	str. 6
8.3 Montáž chodítka RP545.....	str. 6
8.3.1 Složení chodítka.....	str. 7
8.3.2 Montáž a nastavení rukojetí.....	str. 7
8.3.3 Taška.....	str. 7
8.3.4 Sedátko.....	str. 7
8.4 Montáž chodítka RP550 a RP551.....	str. 7
8.4.1 Složení chodítka.....	str. 8
8.4.2 Montáž a nastavení rukojetí.....	str. 8
8.4.3 Montáž opěradla.....	str. 8
8.4.4 Taška.....	str. 8
8.4.5 Sedátko.....	str. 8
9. POUŽITÍ.....	STR. 9
10. BRZDY.....	STR. 9
10.1 Brzdy.....	str. 9
10.2 Zablokování kol.....	str. 9
11. PÉČE A ÚDRŽBA.....	STR. 9
12. ČIŠTĚNÍ.....	STR. 9
13. PÉČE O KOLEČKA.....	STR. 9
14. TECHNICKÉ SPECIFIKACE.....	STR. 10
15. PODMÍNKY LIKVIDACE.....	STR. 10
16. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	STR. 10
17. ZÁRUKA.....	STR. 10
17.1 Opravy.....	str. 11
17.2 Náhradní díly.....	str. 11
17.3 Omezení záruky.....	str. 11

CE Zdravotnický prostředek Třídy I

1. KÓDY

RP540	čtyřkolové chodítko se sedátkem a opěrkami nohou GAYA 2.0
RP545G	čtyřkolové chodítko se sedátkem OCEANO 2.0 Gray
RP545A	čtyřkolové chodítko se sedátkem OCEANO 2.0 Orange
RP545V	čtyřkolové chodítko se sedátkem OCEANO 2.0 Green
RP550	čtyřkolové chodítko se sedátkem URANO 2.0
RP551	čtyřkolové chodítko se sedátkem a předloketní podporou SATURNO

2. ÚVOD

Děkujeme Vám za zakoupení chodítka z řady MOPEDIA společnosti MORETTI. Chodítka z řady MOPEDIA jsou navržena tak, aby vyhovovaly všem Vaším požadavkům na praktické, správné a bezpečné použití. Tento uživatelský návod obsahuje několik užitečných informací pro správné použití vybraného výrobku a nabízí cenné rady pro Vaši bezpečnost. Před prvním použitím doporučujeme si návod přečíst celý a pečlivě. Pokud máte nějaký dotaz, obraťte se, prosím, na svého prodejce, který Vám poskytne náležitou radu a pomoc.

3. OBLAST POUŽITÍ

Tyto chodítka jsou vhodná pro lidi s pohybovými problémy. Mohou být použita jako pomoc pro usnadnění chůze. Nicméně lidé s evidentním problémem paží či s poruchou rovnováhy by tyto chodítka neměli používat. Chodítka mohou být použita jak uvnitř budov, tak i mimo ně. Doporučujeme používat na rovném povrchu, aby se všechna kola dotýkala země. Chodítka nesmí být používána na kamenitém povrchu a na šikmé ploše kvůli možné nestabilitě. Výrobek není určen k přepravě lidí nebo věcí.



VAROVÁNÍ!

- Nepoužívejte výrobek jinak, než je uvedeno v návodu
- Výrobce odmítá odpovědnost za jakékoliv následky vyplývající z nesprávného používání tohoto výrobku a neoprávněného zásahu do konstrukce výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto návodu bez předchozího upozornění.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti prohlašuje s výhradní odpovědností, že výrobky vyrobené a prodávané společností Moretti, patří do sortimentu chodítek – jsou v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (2017/745). Společnost Moretti garantuje a deklaruje výlučnou odpovědnost za následující:

1. Uvedené výrobky splňují základní požadavky uvedené ve Směrnici 2017/745.
2. Uvedené výrobky NEJSOU MĚŘÍCÍMI PŘÍSTROJI.
3. Uvedené výrobky NEJSOU URČENÉ PRO KLINICKÉ ZKOUŠKY.
4. Uvedené výrobky jsou na trh dodávány v NESTERILNÍCH OBALECH.
5. Uvedené výrobky patří do I třídy zdravotnických prostředků.



5. VAROVÁNÍ

5.1 Všeobecná varování

- Nesestavujte a nepoužívejte výrobek, aniž byste si pečlivě přečetli tento uživatelský návod. Pokud nejste schopni pochopit varování, upozornění a instrukce, kontaktujte prodejce nebo technický personál, abyste předešli poškození nebo zranění.
- Chodítko by měli používat pouze pacienti s odpovídající motorikou, která zaručuje použití chodítka bez rizika.
- Poradte se s lékařem či terapeutem o vhodnosti tohoto výrobku vzhledem k Vašemu zdraví.
- Lékař nebo terapeut by měl posoudit nastavení výšky maximální podpory, správnou aktivaci brzdy a obecné sestavení.
- Chodítka nejsou určena k použití jako samohybné zařízení.

5.2 Varování

- Zajistěte, aby byl kabel brzdy správně nastaven.
- Ověřte správnou funkci brzdy po každém nastavení výšky, abyste zabránili volnému ohnutí kabelu.
- Porušení těchto základních pravidel může způsobit zranění uživatele.
- Chodítko lze používat pouze na tvrdém, zpevněném a rovnoměrném povrchu. Nepoužívejte přístroj pro stoupání po schodech.
- Udržujte rovnováhu vždy na obou madlech.
- Věnujte zvláštní pozornost při pohybu po vlhkém, ledovém nebo zasněženém povrchu.
- Přístroj nepřetěžujte.
- Nepoužívejte sedátko (pokud je k dispozici) pro přepravu osob nebo majetku, sedátko je určeno pouze pro uživatele a s aktivovanou parkovací brzdou.
- Všechna kola musí být během používání stále v kontaktu s povrchem, aby se zajistilo správné vyvážení chodítka a maximální bezpečnost.
- Před použitím sedátka musí být chodítko zabrzděno.

POZN. Pokud je chodítko používáno jako opora v nehybné poloze, musí být ruční brzda zablokována

5.3 Nosnost

- Maximální nosnost včetně tašky je 136 kg.
- Taška chodítka má max. nosnost 5 kg.

5.4 Rozložení a složení - varování

- Při montáži ověřte, že obě nosná trubky rukojetí jsou správně zasunuty do rámu, zajištěny pojistkami bez volného pohybu a ve správné poloze.
- Obě nosné trubky rukojetí jsou pevně zajištěné v hlavní nosné části bez volného pohybu a ve správné poloze.
- Nezavěšujte nic na rám chodítka, aby se zabránilo poškození trubek a aby se zabránilo ohrožení stability.
- Dávejte pozor na zachycení či skřípnutí prstů a/nebo oblečení při skládání či rozkládání chodítka.



6. SYMBOLY

	Kód výrobku
	Jedinečná identifikace
	CE označení
	Výrobce
	Šarže
	Návod k použití
	Zdravotnický prostředek
	Podmínky likvidace
	Maximální nosnost

7. PŘED POUŽITÍM

Před použitím vždy zkontrolujte:

1. Že všechny části chodítka jsou zajištěné bezpečným způsobem a ve správné poloze.
2. Zda jsou všechny šrouby dotaženy.
3. Ujistěte se, že sedátko je řádně zajištěno. (dokud nezapadne do spodního rámu).
4. Zda je taška správně nasazena.
5. Zkontrolujte správnou funkci brzd.


8. MONTÁŽ

8.1 Před montáží

Vybalte výrobek a zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy k jeho poškození. V případě, že je chodítko poškozeno, obraťte se, prosím, na svého nejbližšího prodejce.

8.2 Montáž chodítka RP540 GAYA 2.0

- Opěrka noh k chodítku je balena samostatně.
- Když budete chodítko poprvé montovat, rukojeti s pojistnými úchyty nebudou spojeny – vložte dvě trubky rukojetí do rámu.

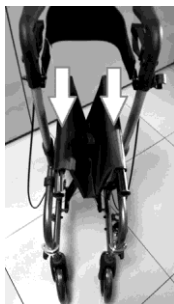

- Chodítko rozložíte stlačením rámu sedátka, dokud se trubka rámu nezastaví v polohovacím zámku.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda se chodítko nesklápí i za použití malé síly. Při připojování dbejte na to, aby brzdový kabel nebyl nikde omezován
- Opěrku noh nasadte na rám.



VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že jsou pojistná tlačítka pevně zasunuta do rámu.

8.2.1 Složení chodítka

Chodítka složíte potáhnutím popruhů uprostřed sedátka.

8.2.2 Montáž a nastavení rukojetí

Vložte rukojeti do rámu. Stiskněte tlačítko pružiny a nastavte požadovanou výšku. To samé u druhé rukojeti. Před použitím se ujistěte, že obě rukojeti jsou zajištěny a nastaveny ve stejné výšce. Chodítka jsou vybavena výškově nastavitelnými rukojetmi, aby bylo možné vyhovět všem uživatelům.



VAROVÁNÍ!

Nastavte výšku rukojetí chodítka tak, aby uživatel měl zápěstí ve výšce rukojetí. To při použití chodítka zaručí, aby paže byly v úhlu 20° - 30°.

8.2.3 Taška

Chcete-li přidat tašku, zavěste ucha tašky na sedátko, tašku připevněte pomocí suchého zipu k rámu.



VAROVÁNÍ! Používejte tašku pouze pro drobné předměty. Nepřeplňujte ji, aby nedošlo k nerovnováze a převrácení.

8.2.4 Sedátko

Než se posadíte, umístěte chodítko na rovnou a pevnou plochu a zajistěte brzdy. Ujistěte se, že západka zámku je správně zajištěna a že chodítko je ve stabilní poloze.



VAROVÁNÍ! Sed'te rovnoměrně. Nesed'te pouze na jedné straně.


8.2.5 Opěrka noh



Vložte opěrku noh do rámu. Pokud opěrka není momentálně potřeba, zajistěte ji, jak je uvedeno na obrázku.

8.3 Montáž chodítka RP545 OCENANO 2.0

- Otočte kolečkem ve správném směru a uvolněte pás, který blokuje zadní kola. Zajistěte zadní a přední kola přiloženými šrouby.
- Když budete chodítko poprvé montovat, rukojeti s pojistnými úchyty nebudou spojeny – vložte dvě trubky rukojetí do rámu.

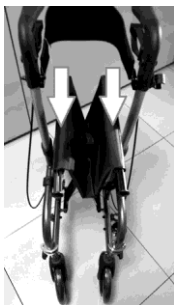

- Chodítko rozložíte stlačením rámu sedátka, dokud se trubky rámu nezastaví v polohovacím zámku.



VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že jsou pojistná tlačítka pevně zasunuta do rámu. Před použitím vždy zkontrolujte, zda se chodítko nesklápí i za použití malé síly. Ujistěte se, že jsou pojistná tlačítka pevně zasunuta do rámu.

8.3.1 Složení chodítka

Chodítko složíte potáhnutím popruhů uprostřed sedátka.

8.3.2 Montáž a nastavení rukojetí

Vložte rukojeti do rámu. Stiskněte tlačítko pružiny a nastavte požadovanou výšku. To samé u druhé rukojeti. Před použitím se ujistěte, že obě rukojeti jsou zajištěny a nastaveny ve stejné výšce. Chodítko jsou vybavena výškově nastavitelnými rukojetmi, aby bylo možné vyhovět všem uživatelům.



VAROVÁNÍ!

Nastavte výšku rukojetí chodítka tak, aby uživatel měl zápěstí ve výšce rukojetí. To při použití chodítka zaručí, aby paže byly v úhlu 20° - 30°.

8.3.3 Taška

Chcete-li přidat tašku, zavěste ucha tašky na sedátko, tašku připevněte pomocí suchého zipu k rámu.



VAROVÁNÍ! Používejte tašku pouze pro drobné předměty. Nepřepínajte ji, aby nedošlo k nerovnováze a převrácení. Max. nosnost je 5 kg.

8.3.4 Sedátko


Než se posadíte, umístěte chodítko na rovnou a pevnou plochu a zajistěte brzdy. Ujistěte se, že západka zámku je správně zajištěna a že chodítko je ve stabilní poloze.





VAROVÁNÍ! Sed'te rovnoměrně. Nesed'te pouze na jedné straně.

8.4 Montáž chodítka RP551 SATURNO a RP550 URANO 2.0

- Pokud je pojistka uzamknuta, uvolněte ji.
- Když budete chodítko poprvé montovat, rukojeti s pojistnými úchyty nebudou spojeny – vložte dvě trubky rukojetí do rámu.

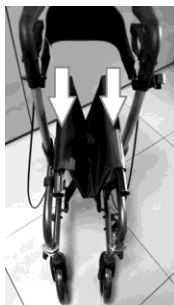

- Chodítko rozložíte stlačení rámu sedátka, dokud se trubky rámu nezastaví v polohovacím zámku.

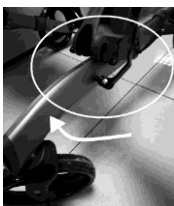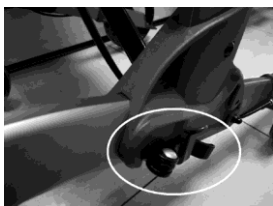

- Otočte držáky kol a zamkněte jak je uvedeno na obrázku.



VAROVÁNÍ! Před použitím vždy zkontrolujte, zda se chodítko nesklápí i za použití malé síly. Ujistěte se, že jsou pojistná tlačítka pevně zasunuta do rámu.

841 Složení chodítka

Chodítko složíte potáhnutím sedátka nahoru.

842 Montáž a nastavení rukojetí

Vložte rukojeti do rámu a zajistěte je vhodným způsobem. Chodítka jsou vybavena výškově nastavitelnými rukojetmi, aby bylo možné vyhovět všem uživatelům.



VAROVÁNÍ!

Nastavte výšku rukojetí chodítka tak, aby uživatel měl zápěstí ve výšce rukojetí. To při použití chodítka zaručí, aby paže byly v úhlu 20° - 30°.

843 Montáž opěradla

Vložte opěradlo do konstrukce chodítka.

844 Taška

Chcete-li přidat tašku, zavěste ucha tašky na sedátko, tašku připevněte pomocí suchého zipu k rámu.



VAROVÁNÍ! Používejte tašku pouze pro drobné předměty. Nepřeplňujte ji, aby nedošlo k nerovnováze a převrácení. Max. nosnost je 5 kg

845 Sedátko

Než se posadíte, umístěte chodítko na rovnou a pevnou plochu a zajistěte brzdy. Ujistěte se, že západka zámku je správně zajištěna a že chodítko je ve stabilní poloze.



VAROVÁNÍ! Sedněte rovnoměrně. Nesedněte pouze na jedné straně.

9. POUŽITÍ

- Chodítko tlačte dopředu, buďte ve vzpřímené poloze a obě ruce mějte na rukojeti.
- Chodítko používejte pouze se suchýma rukama, tím předejdete uklouznutí.
- Chodte vzpřímeně a dívejte se před sebe, ne dolů.
- Netlačte chodítko příliš daleko od těla, předejdete možnému pádu a nesprávnému zatížení chodítka.
- Při chůzi s chodítkem nepřekračujte schody vyšší než 20 mm. Při použití ve vekovním prostoru používejte raději bezbariérové chodníky/přechody.
- Chce-teli překonat malé překážky, které mohou způsobit opotřebení zadních opěrek nohou, přizdvínete přední část chodítka (models RP540 - RP545x- RP551)

10. BRZY

10.1 Brzdy

Abyste chodítko zastavili, stiskněte brzdové páčky nahoru. Chcete-li pokračovat v chůzi, páčky uvolněte.

10.2 Zablokování kol

Stiskněte brzdovou páčku dolů, jakmile uslyšíte “cvaknutí”, kola budou zablokována.



VAROVÁNÍ! Když uživatel déle stojí na jednom místě, brzdy musí být zablokovány.

11. PÉČE A ÚDRŽBA

Výrobky z řady MOPEDIA jsou pečlivě kontrolovány a nesou označení CE. Pro bezpečnost pacienta/uživatele se doporučuje nechat nejméně každé 2 roky výrobky z řady MOPEDIA zkontrolovat buď výrobcem, nebo prodejcem, aby se zjistilo, zda výrobky jsou stále vhodné k použití. Při opravách je třeba použít pouze originální náhradní díly a příslušenství. Doba životnosti výrobku závisí na používání, údržbě, skladování a čištění.

12. ČIŠTĚNÍ

K čištění výrobku používejte pouze vlhký hadřík s neutrálním čistícím prostředkem. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující rozpouštědla, také nepoužívejte kovové kartáče, abrazivní či ostré předměty – může dojít k poškození výrobku.

13. PÉČE O KOLEČKA

1. Kolečka omyjte teplou vodou s jemným mycím prostředkem. Otřete je čistým hadříkem.
2. Pravidelně kolečka promazávejte.

14. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

typ GAYA 2.0	
kód výrobku	RP540
sedátko	45x31 cm
rám	hliník
nosnost a rozměry	

RP540	75	85 97	55	63	52	28	9,6	20	20	136 kg

typ		OCEANO 2.0	SATURNO
kód výrobku		RP545x	RP551
sedátko		45x20 cm	44x24 cm
rám	hliník		
nosnost a rozměry			

RP545G										
RP545A	69	79 92	54	62	47	27	7,6	20	20	136 kg
RP545V										
RP551	70	115+130 Antibrachial 100+115	56	68	52	28	7,9	25		

typ URANO 2.0	
kód výrobku	RP540
sedátko	44x24 cm
rám	hliník
nosnost a rozměry	

RP550	70	77 94	55	62	48	28	7,5	20	20	136 kg

Uvedené rozměry mají odchylku +/- 0,5 cm.

15. PODMÍNKY LIKVIDACE



Při likvidaci chodítka nikdy nepoužívejte běžné systému zpětného odběru komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidace prostřednictvím sběrných dvorů, kde se jednotlivé části chodítka roztřídí podle použitého materiálu.

16. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství nalezente vždy v hlavním katalogu MORETTI.

17. ZÁRUKA

Všchny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od odata prodeje, s výhradou výjimek a omezení níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu na použití. Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto výrobku v rozporu s tímto návodem. Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě poškození výrobku přírodními vlivy, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k použití, neoprávněné úpravy výrobku, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele). Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením.

17.1 Opravy

Záruční opravy: V případě, že výrobek má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravu výrobku v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce výrobku. Oprava nebo výměna neobnovuje nebo neprodlužuje záruku.

Pozáruční opravy: Výrobek, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se vztahuje záruční doba po dobu šesti (6) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen.

Neoprávněná reklamace: Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného výrobku dodavatelem, výrobek není vadý a nelze uplatnit záruční opravu.

17.2 Náhradní díly

Na originální náhradní díly je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly použity.

17.3 Omezení záruky

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu s platnou vyhláškou. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající z náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány



MORETTI S.p.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com